



activ5™

Genuine Accessories

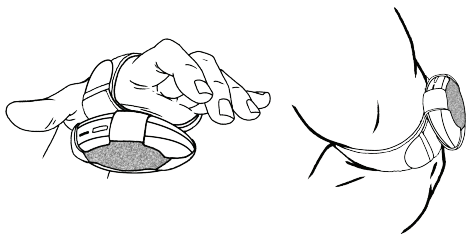


Bedienungsanleitung

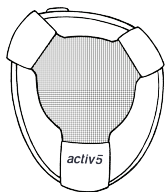


Bitte verwenden Sie die ActivBody Produkte und Zubehörteile allein für die genannten Zwecke und Anwendungsmethoden, nachdem Sie mit Ihrem zuständigen Arzt, Physiotherapeuten oder Trainer gesprochen haben. Befolgen Sie stets die Anweisungen in den zugehörigen Handbüchern und Softwareanwendungen.

© 2018 - 2019 ActivBody, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

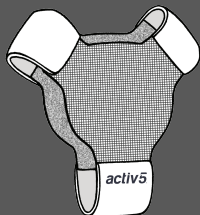


Accessory Attachment Zubehörfestigung


Das Accessory Attachment stattet jede Seite des Activ5 Geräts mit einer Kontaktflächenscheibe aus (entweder Haken oder Ösen), mit der andere kompatible Zubehörprodukte oder Objekte, die über Haken oder Ösen verfügen, befestigt werden können.

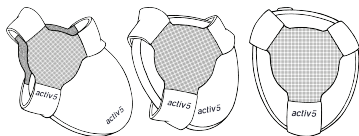


- Für den richtigen Sitz schieben Sie den Activ5 in das Accessory Attachment, sodass die Activ5 Logos auf beiden Geräten übereinstimmen.

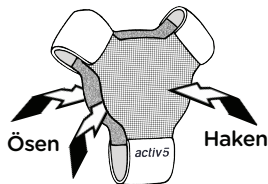


- Wenn das Logo des Accessory Attachment sichtbar ist (nach außen zeigt), befindet sich daneben die Hakenscheibe und auf der gegenüberliegenden Seite des Activ5 die Ösenscheibe. Diese Konfiguration ist praktisch, wenn Sie den Activ5 mit dem Wrap (Gurt) oder anderen Zubehörprodukten oder Objekten, die über Ösen verfügen, befestigen möchten.

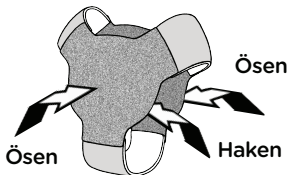

- Wenn Sie das Accessory Attachment wenden, bietet es Komfort und weitere Kombinationen, um den Activ5 an Zubehörprodukten oder Objekten, die über Haken verfügen, zu befestigen.

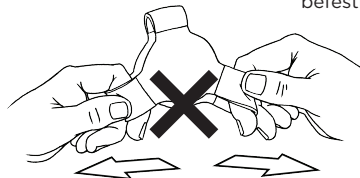

Dehnen Sie das Accessory Attachment nur so weit, dass Sie das Activ5 Gerät einschieben und anpassen können.

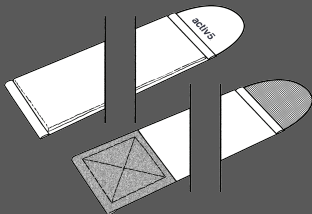

Wrap Gurt

Der Wrap ermöglicht es, das Activ5 Gerät an verschiedenen Körperteilen zu befestigen - zum Beispiel an den Handflächen, Handgelenken, Ellbogen, Knöcheln, Füßen usw.

