



activ5™

Genuine Accessories

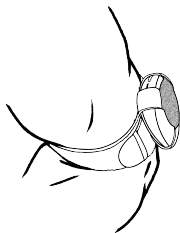

MANUEL D'UTILISATION

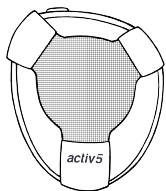


Veillez utiliser les produits et accessoires ActivBody uniquement aux fins et méthodes d'utilisation mentionnées, après avoir consulté votre médecin traitant, votre thérapeute ou votre formateur et après avoir suivi les instructions fournies dans les manuels et les applications logicielles correspondants.




Accessory Attachment

Fixation d'accessoire


L'Accessory Attachment est retenu de chaque côté de l'appareil Activ5, avec un disque de surface de contact (constitué de crochets ou de boucles) auquel d'autres objets ou accessoires dotés de boucles ou de crochets peuvent être fixés.

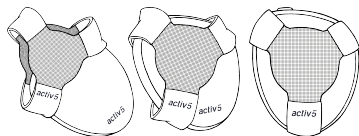

- Pour un bon ajustement, faites glisser l'appareil Activ5 dans l'Accessory Attachment, de sorte que la position des logos Activ5 des deux articles coïncide.

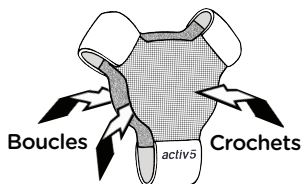


- Si le logo de l'Accessory Attachment est visible (orienté vers l'extérieur), le disque à crochets sera du côté de l'appareil, tandis que le disque à boucles sera du côté opposé à l'Activ5. Cette configuration est utile pour fixer l'Activ5 à la Wrap (Bandelette) ou à d'autres objets ou accessoires dotés de boucles.

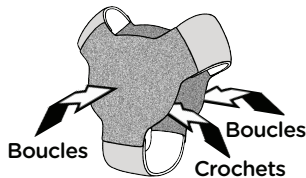

- Retourner l'Accessory Attachment sur l'envers offre plus de confort et plus de combinaisons pour fixer l'Activ5 avec des accessoires ou des objets présentant une surface dotée de crochets.



N'étirez pas l'Accessory Attachment plus que nécessaire pour insérer et ajuster l'appareil Activ5!

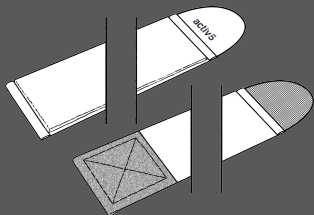

Wrap Bandelette

Le Wrap permet de fixer l'appareil Activ5 sur différentes parties du corps : paume des mains, poignets, coudes, chevilles, pieds, etc.

